


Łatwe zarządzanie danymi Oprogramowanie EasyDirect™ Balance



Automatyczne gromadzenie danych

Gromadzenie danych ważenia z nawet 10 wag przez interfejs Ethernet, USB-C lub RS232. Minimalizacja błędów związanych z ręcznym przepisywaniem, oszczędność czasu oraz bezpieczne przechowywanie danych.

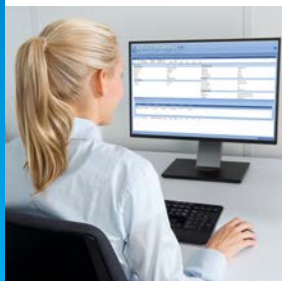

Sprawną obsługę wyników

Łatwe przeglądanie wyników i filtrowanie według daty, urządzenia, użytkownika lub próbki. Wizualizacja wyników na wykresach, aby ocenić zakresy docelowe i tolerancje oraz wykonywanie statystyk w celu sprawnej analizy trendów i produkcji.



Łatwe raportowanie i eksport

Raporty wyników ważenia są teraz proste i przejrzyste. Dane można eksportować do komputera w różnych formatach (XML, CSV, XLSX lub PDF) albo drukować na drukarce sieciowej.



Prosty podgląd urządzeń

Udostępniając informacje o adiustacji, testach i statusie serwisowym, oprogramowanie EasyDirect Balance umożliwia prosty roboczy podgląd wszystkich podłączonych urządzeń.



Koniec problemów z obsługą danych ważenia

Wagi można podłączyć do oprogramowania komputerowego EasyDirect Balance, aby usprawnić zarządzanie danymi i ich obsługę. Instalacja i konfiguracja przebiegają bardzo sprawnie, a obsługa jest intuicyjna.

Łatwe zarządzanie danymi pomoże poprawić sprawność zadań ważenia. Dzięki oprogramowaniu EasyDirect Balance dane ważenia są gromadzone automatycznie, co ułatwia tworzenie raportów, wizualizację wyników na wykresach kontrolnych, sporządzanie statystyk i przejrzysty podgląd statusu wag.

Ściągnij 45-dniową wersję próbną:

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Technical Description

Supported Instruments	MS-TS, ML-T¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
Connectivity	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
Data Collection		
Balance Information		
Basic balance information	•	•
Level, adjustment, test and service status	•	
Balance usage	•	
Weighing Data		
Supported applications	Weighing, counting, percent weighing, factor weighing	•
	Checkweighing, dynamic weighing, formulation, totaling, back weighing, differential weighing, density	•
Weight, unit, date/time, sample and task IDs	•	•
Target and tolerances	•	
User name	•	
Application-specific results and parameter	•	
Maximum Number of Instruments	Up to 10 balances	
Report Formats	XML, CSV, XLSX, PDF	
Database	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
PC Requirements	OS: Windows 10 and 11	
Protection	Password protection of settings and results	
Languages	English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Czech, Hungarian, Dutch, Portuguese, Turkish, Japanese, Chinese, Korean	
Material Numbers	30539323 EasyDirect Balance (License for up to 3 instruments) 30540473 EasyDirect Balance (License for up to 10 instruments)	

¹⁾ Full functionality only via Ethernet



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

For more information

Subject to technical changes
© 03/2024 METTLER TOLEDO. All rights reserved
30553484B
Group MarCom RITM1159092 MB/NM